




“세정건조 시스템,”

감염예방 + 장애인/노인 자립지원

이런분들에게 추천합니다!

- 복지용구소독대행업체, 복지용구사업소
- 노인복지관, 요양원, 요양병원
- 장애인종합복지관, 장애인체육관, 장애인자활센터 등

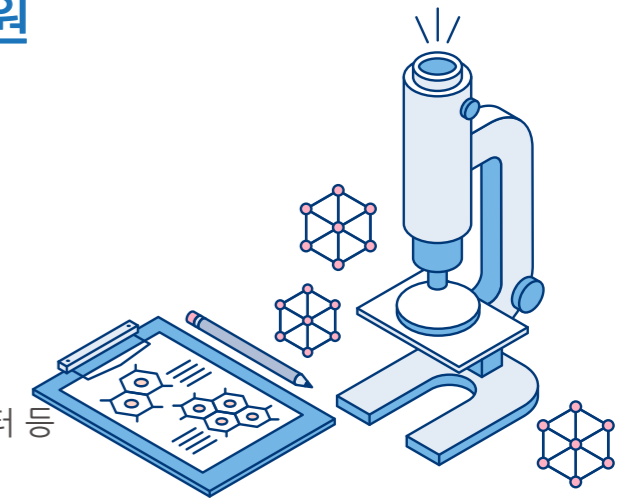

세정건조 시스템이란?

- 일본 복지용구 소독세정기 업계 1위 제품으로 내구성이 뛰어납니다.
- 우수하고 균일한 품질의 소독서비스 제공이 가능합니다.
- 시간 및 인력 감소에 도움이 되어 효율적 입니다.
- 복지용품 뿐 만 아니라 토탈케어, 소독대행 등 다양한 사업을 전개하실 수 있습니다.

복지·재활용품 건조용 소형 건조기

“다목적 건조기 KS-3B,”

Welfare equipment Disinfection / Drying machine



다양한 용품 건조 가능

휠체어, 매트리스, 이불, 담요 등 일반 건조기로는 건조 하기 어려운 다양한 제품을 빠른 시간 내에 건조할 수 있습니다.



<동일 종류 또는 여러 종류를 혼합하여 동시 건조 가능>

건조용 대차 포함

소독고에 들어가는 대차가 포함되어 있어, 작업이 간단 합니다. 이불, 베개, 등 1인 분의 침구용품을 한번에 건조할 수 있습니다.



<대차를 사용하여 누구나 손쉽게>

간단한 작동 방식

자주 사용하는 제품별로 사전에 건조시간을 세팅해 두고, 원터치 작동 방식으로 간단하게 이용하실 수 있습니다.



깨끗한 가열 공기

열 교환 방식으로, 언제나 깨끗한 가열 공기로 소독 건조 합니다.

뛰어난 내구성

견고한 스테인리스 사양으로, 잔 고장없이 오랜 기간 사용하실 수 있습니다.

■ 살균효과시험(일반재단법인 일본식품분석센터)

	대장균	황색포도상구균	녹농균
처리 전	6.0 X 10 ⁵	6.3 X 10 ⁵	7.4 X 10 ⁵
처리 후	< 10	< 10	< 10

[시험 조건] 처리 온도: 90℃ / 처리 시간: 120분



최대 100°C의 열 교환 방식의 소독·건조 시스템으로 빠르고 간편하게!

● 제품사양

모델명	KS-3B
온도조절	50 ~ 100℃
치수	W 800 X L 2,300 X H 1,900mm
중량	약 500kg
전원	3상 200V 30A
처리 능력	매트리스 3장 or 이불 4장 or 휠체어 2대 외
처리 시간	약 120분 (조절 가능)