




# “세정건조 시스템,”

## 감염예방 + 장애인/노인 자립지원

### 이런분들에게 추천합니다!

- 복지용구소독대행업체, 복지용구사업소
- 노인복지관, 요양원, 요양병원
- 장애인종합복지관, 장애인체육관, 장애인자활센터 등

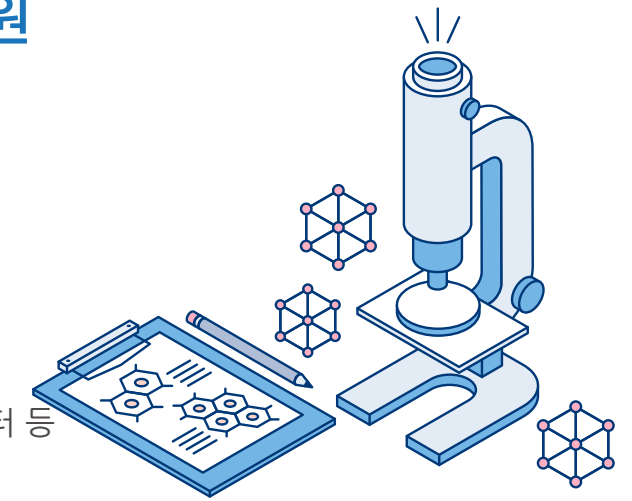

### 세정건조 시스템이란?

- 일본 복지용구 소독세정기 업계 1위 제품으로 내구성이 뛰어납니다.
- 우수하고 균일한 품질의 소독서비스 제공이 가능합니다.
- 시간 및 인력 감소에 도움이 되어 효율적 입니다.
- 복지용품 뿐 만 아니라 토탈케어, 소독대행 등 다양한 사업을 전개하실 수 있습니다.

이동 보조기기 바퀴 자동 세정기

# “휠체어 바퀴 세정기 RM-2,”

Wheel chair wheel washer



## 업무 효율성 증대

휠체어 바퀴 자동 세정기는 제품을 기기 위에 올려두면, 기기내에 내장된 회전브러시와 고정 러시가 각각 바퀴의 밑면과 앞면을 자동으로 세정합니다. 담당자가 한번 세팅해 놓고 다른 업무를 할 수 있기 때문 효율성을 극대화 할 수 있습니다.

## 우수한 세정력

특수 브러시가 내장되어 있어, 바퀴 앞면과 측면까지 동시에 깨끗하게 세정합니다.

## 다양한 타입의 바퀴/캐스터 대응 가능

보행기 등 휠체어 이외에도 다양한 바퀴 또는 캐스터의 세정에 사용하실 수 있습니다.

## 컴팩트 사이즈

폭 43cm로 어디서든 이동 설치가 간편합니다.

## 간편한 작동


허리를 굽히지 않고 Foot(발)스위치로 편하게 사용할 수 있습니다.



<RM-2에 휠체어를 올린 모습>



세정전      세정후  
<우수한 세정력>

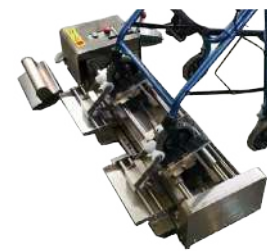

세척하기 힘든 바퀴의 찌든 때를  
자동으로 세정!

## ● 제품사양

모델명	RM-2
전원	AC100V (단상 220V 변압기 부착)
크기	W1,160 X L430 X H275mm
대상 사이즈	캐스터 : 6인치, 7인치
	타이어: 16인치, 18인치, 20인치, 22인치
중량	약 55 Kg
처리 시간	약10분~1시간 (오염 정도에 따라 조정)